

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	11/05/2026
Número de Série / Lote:	202506100001
HGID:	25061123
Cliente (caso aplicável):	Jorge Alberto Capra Biasuz

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Equipamento próximo de atingir 1 ano de uso, estava apresentando LED vermelho de forma frequente fora de uso conforme descrito pela médica.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Apresentação constante de LED vermelho, Equipamento está sendo reconhecido na porta COM, não foi localizada sobrecarga nela.

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Todos os sensores se mostram fora das métricas de calibração, porém a médica se diz satisfeita com todos os exames realizados, não apontando nenhum mal desempenho das curvas. Observo que as curvas estão com certa similaridade.

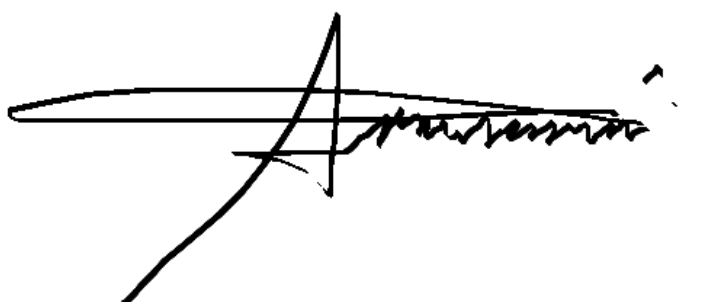
No debug não encontramos erros, após mudar a porta USB, desligar e religar o equipamento. Ponto de atenção é para a quantidade de vezes que ocorreu o "INITIALIZATION_FAIL", conforme logs em anexo. O erro se dá por um mal contato em um componente interno. Necessário recolhimento para manutenção

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza